
Entratek Wärmeunterbett

Ferninfrarot-Heiztechnologie



Fünfstufige
Temperaturregelung



Fünfstufige
Timing-Funktion



Weich
und bequem



Antibakterielle und
Milbenentfernung



 **Entratek**

Hinweis:

Bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen

- **Sicherheitshinweis:** Dieses Produkt ist nicht für die eigenständige Verwendung durch Kinder geeignet. Kinder sollten es unter elterlicher Aufsicht verwenden, um die sichere Verwendung zu gewährleisten.
- **Reinigung und Wartung:** Nach dem Ausschalten der Stromversorgung und dem Entfernen des Controllers kann das Wärmeunterbett gewaschen oder maschinell gereinigt werden, es wird jedoch nicht empfohlen, dies oft zu tun, da dies die Effizienz der Wärmeerzeugung beeinflusst.
- **Netzteilproblem:** Wenn das Netzkabel locker ist oder andere Stromversorgungsprobleme auftreten, vermeiden Sie bitte potenzielle Gefahren. Wir empfehlen, Reparaturen von Fachleuten durchführen zu lassen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.
- **Überhitzungsschutz:** Wenn ein Teil des Produkts überhitzt, stellen Sie die Verwendung sofort ein. Eine weitere Verwendung kann zu einem Kurzschluss führen. Beenden Sie aus Sicherheitsgründen die Nutzung und suchen Sie professionelle Hilfe.

Anweisungen für den Gebrauch

- Legen Sie die Heizdecke auf das Sofa oder Bett, stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste drei Sekunden lang, um die Heizdecke zu starten. Passen Sie die Temperatur- und Timer-Taste je nach Bedarf.
- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, wenn es unbeaufsichtigt ist oder nicht verwendet wird, um Unfälle zu vermeiden.

TIMER-SYMBOLLICHT

- Nach dem Drücken der Timer-Taste leuchtet das Timer-Symbol auf, und wenn die Taste 3 Sekunden lang nicht betätigt wird, erlischt das Timer-Symbol.


- Drücken Sie wiederholt die Timer-Taste, um 2-4-8-12-24-2-4... einzustellen. Ausschalten des Geräts für 2 Stunden, entsprechend diesem Bestellzyklus

TIMER-TASTE

- 2h, 4h, 8h, 12h, 24h. insgesamt 5 Gänge
- Die entsprechenden Temperaturen sind: 30°C, 35°C, 40°C, 45°C, 50°C
- 24h bedeutet dauerhaft geöffnet

SCHALTER

- Zum Ein-/Ausschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt

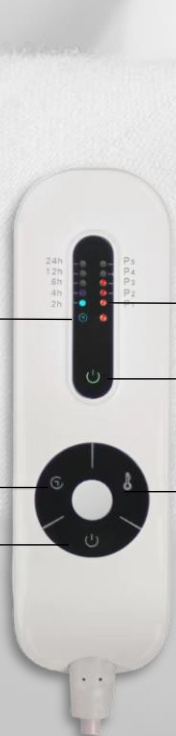

HEIZSTUFE- & TIMER-ANZEIGELICHT

- Aktuelle Temperatur anzeigen

SCHALTZUSTANDS-ANZEIGELICHT

HEIZSTUFE-TASTE

- P1-P5 Stufe können zyklisch angepasst werden
- Wenn die Heizstufe höher als P3 ist, wird sie nach 0,5 Stunden automatisch auf P3 abgesenkt

Gesundheitliche Vorteile von Ferninfrarot-Strahlen

- **Verbesserung der Blutzirkulation:** Infrarotstrahlen dringen tief in die unter der Haut liegenden Gewebe ein, erhöhen die Temperatur des subkutanen Gewebes und erweitern die Kapillaren, um die Blutzirkulation zu fördern. Dies stärkt den Stoffwechsel des Organismus und der Zellen und verbessert die Mikrozirkulation.
- **Verbesserung von Gelenkschmerzen:** Infrarotstrahlen können tief in Muskeln und Gelenke eindringen, den Körper erwärmen, die Muskeln entspannen und die im Körper angesammelten Ermüdungsstoffe und Milchsäure abbauen.
- **Entzündungshemmende Wirkung:** Die Wärme des Infrarotlichts wirkt sich auf die neurohumorale Reaktion aus und unterbricht den pathologischen Prozess der Entzündungsreaktion. Dadurch wird das gestörte physiologische Gleichgewicht beschleunigt wiederhergestellt, die lokale und systemische Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten verbessert, die Funktion der Immunzellen aktiviert und die Phagozytose Fähigkeit von weißen Blutkörperchen und retikulären Endothelzellen gestärkt.
- **Steigerung des Stoffwechsels im Körper:** Durch die thermische Wirkung von Infrarotstrahlen kann die Zellaktivität gesteigert, der Ruhezustand des Nervensystems reguliert und der Stoffwechsel verbessert werden, um einen stabilen Zustand des Stoffaustauschs im Körper zu erreichen.


- **Pflege und Schönheit:** Einige Studien legen nahe, dass Infrarotstrahlen die Synthese von Kollagen fördern, die Elastizität und Straffheit der Haut erhöhen und die Reparatur geschädigter Hautgewebe sowie die Zellregeneration fördern können.
- **Schmerzlinderung:** Infrarotstrahlen werden als schmerzlindernd angesehen. Studien zeigen, dass Infrarotstrahlen durch die Förderung der Blutzirkulation und Verbesserung der Sauerstoffversorgung Entzündungen lindern und die Gewebereparatur fördern können, was zur Linderung von Schmerzen beiträgt. Darüber hinaus kann die Wärme und Entspannungswirkung von Infrarotstrahlen auch zur Linderung von Muskelschmerzen und Beschwerden beitragen.

Anweisungen für den Gebrauch

- Das Infrarot-Wärmeunterbett ist eine Heizeinrichtung, die entwickelt wurde, um eine warme und komfortable Schlafumgebung zu bieten. Sie kann keine medizinischen Geräte oder Medikamente ersetzen. Dieses Produkt dient ausschließlich dem allgemeinen Zweck der Wärmeisolierung und des Komforts und ist nicht zur Behandlung, Vorbeugung oder Linderung von Krankheiten oder Symptomen geeignet.
- Schwangere, ältere Menschen, Personen mit Herzproblemen, Kreislaufstörungen oder anderen gesundheitlichen Problemen sollten vor der Verwendung der Infrarot-Elektrischen-Heizdecke den Rat eines Arztes einholen. Bestimmte Gesundheitszustände können empfindlich auf Hitze reagieren und erfordern eine vorsichtige Verwendung.
- Das Produkt sollte nur innerhalb seines vorgesehenen Verwendungsbereichs verwendet werden und darf weder umgebaut, zerlegt noch repariert werden. Jegliche nicht autorisierte Eingriffe können zu Sicherheitsrisiken oder Beschädigungen des Produkts führen.
- Das Unternehmen übernimmt keinerlei Haftung für Personenschäden, Sachschäden oder sonstige Schäden, die auf unsachgemäße Verwendung oder Missbrauch des Produkts zurückzuführen sind. Die Verwendung dieses Produkts erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers.

Daten zum Produkt

Produktname	Heizdecke
Modell	JSB-02
Betriebsspannung	24 V
maximale Leistung	55 W
Spezifikation	150 x 80 cm
Oberstoff	Polyester
Innenmaterial	Niederspannungsheizung aus Kohlefaser
Temp.-Einstellung	5-stufig
Timing-Einstellungen	2h/ 4h/ 6h/ 12h/ 24h
Zertifizierung	CE/ RoHS/ REACH

 Dieses Gerät entspricht den Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der aktuellen europäischen RoHS- und CE-Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, CE2011/65/EU



Gemäß der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) müssen dieses Produkt und seine Verpackung ordnungsgemäß entsorgt werden.

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll. Bringen Sie es stattdessen zur Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte oder geben Sie es bei autorisierten Recyclingzentren ab.



Entratek GmbH
Liliencronstr. 65
21629 Neu Wulmstorf Deutschland

E-Mail:
info@entratek.de
support@entratek.de

www.entratek.de